

①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①⑪ N° de publication : 2 764 989

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

②① N° d'enregistrement national : 97 07730

⑤① Int Cl⁶ : G 01 N 33/68, G 01 N 33/577, C 07 K 16/26, C 12 N 5/
18

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 20.06.97.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 24.12.98 Bulletin 98/52.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥① Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS
SOCIÉTÉ ANONYME — FR.

⑦② Inventeur(s) : BOUANANI MAJIDA, KAMAL NADIA,
LARUE CATHERINE CHRISTIANE MARIE, MANI
JEAN CLAUDE, PAU BERNARD et SIOHAN ELISA-
BETH.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : CABINET LAVOIX.

⑤④ PROCÉDE DE DOSAGE DU C-PEPTIDE.

⑤⑦ La présente invention concerne un procédé de dosa-
ge spécifique du C-peptide, qui permet d'éliminer toute in-
terférence due à la proinsuline et ses intermédiaires,
notamment à la des-31, 32-proinsuline et/ ou à la des-
64,65proinsuline. Elle concerne également des anticorps
qui permettent de mettre en oeuvre ce dosage.

FR 2 764 989 - A1



La présente invention concerne un procédé de dosage spécifique du C-peptide, qui permet d'éliminer toute interférence due à la proinsuline et à ses intermédiaires, notamment à la des-31,32-proinsuline et/ou à la des-64,65-pro-insuline. Elle concerne également des anticorps qui permettent de mettre en oeuvre ce dosage.

L'insuline est synthétisée par les cellules β des îlots de Langerhans à partir d'un précurseur, la proinsuline. La proinsuline subit l'action d'enzymes protéolytiques qui en détachent l'insuline (masse moléculaire 5.800 Daltons) et le C-peptide (masse moléculaire 3.020 Daltons). Cette hydrolyse met en jeu deux types de protéases, l'une de type carboxypeptidase et l'autre de type endopeptidase. Le processus engendre des composés intermédiaires tels que la split-32,33-proinsuline, la split-65,66-proinsuline, la des-31,32-proinsuline, et la des-64,65-proinsuline, qui avec la proinsuline intacte subsistent en faibles proportions (2 à 6 %) aux côtés de l'insuline et du C-peptide.

Le rapport équimolaire d'insuline et de C-peptide au niveau portal n'est pas retrouvé au niveau périphérique. Dans le sang veineux périphérique à l'état basal, il y a en moyenne 3 à 6 fois plus de C-peptide que d'insuline. Ce phénomène s'explique par les différences de métabolisme entre ces deux polypeptides. Près de 50 % de l'insuline est inactivée au cours de la traversée hépatique. Les quantités restantes sont inactivées au niveau de ses récepteurs périphériques présents notamment dans les tissus musculaires ou adipeux. Par contre, le C-peptide traverse presque librement le foie et, de ce fait, a une demi-vie plasmatique beaucoup plus longue que l'insuline (30 minutes pour le C-peptide et inférieure à 5 minutes pour l'insuline). Le C-peptide ne possède aucune action biologique connue. Son rôle se limite au repliement de la molécule de proinsuline dans les cellules β du pancréas. Il apparaît dans le secteur vasculaire comme un simple résidu, avant d'être éliminé sous forme intacte par le rein.

Le dosage plasmatique ou urinaire du C-peptide constitue donc un moyen d'évaluation de l'insulinosécrétion beaucoup plus fiable que le dosage d'insuline. A noter que le dosage du C-peptide permet une estimation de la production d'insuline endogène, même lors de l'administration chez le patient d'insuline exogène ou en présence d'anticorps anti-insuline qui ne permettent pas le dosage immunologique direct de l'insuline.

Le dosage du C-peptide trouve en particulier son application dans le diagnostic différentiel entre le diabète de type I et le diabète de type II, l'évaluation de la fonction pancréatique résiduelle des cellules β , la détection et la surveillance de la phase de rémission du diabète de type I, le dépistage
5 des hypoglycémies factices provoquées par injection d'insuline, dans le diagnostic de l'insulinome et l'évaluation de la sécrétion d'insuline au cours des affections hépatiques.

Le dosage du C-peptide est également utile pour établir un pronostic de
10 diabète pour le fœtus lors de la surveillance de la grossesse chez les femmes diabétiques. Par ailleurs, la mesure du C-peptide est utilisée lors de la surveillance de la pancréatectomie totale.

Des procédés de dosages du C-peptide sont connus. La demande de
15 brevet EP 227351 décrit l'utilisation d'un antisérum anti-C-peptide pour mesurer le C-peptide dans un dosage radioimmunologique par compétition. Des anticorps monoclonaux anti-C-peptide utiles dans des tests radioimmunologiques sont également décrits par Angelo et al (*Diabetes Research and Clinical Practice* (1985) vol. suppl. 1, p. 18-19). Comme dans le
20 cas précédent, ces anticorps trouvent leur application dans un immunodosage par compétition. La demande EP 484961 couvre un procédé de détection et de dosage de type "sandwich" du C-peptide. Selon cette demande, ce procédé peut être réalisé en utilisant des anticorps monoclonaux ou polyclonaux et l'évaluation du C-peptide peut être notamment réalisée par la technique
25 ELISA, par exemple.

Le brevet CS 277597, publié le 17 mars 1993, décrit également des anticorps monoclonaux, utilisés pour la détermination de la proinsuline ou du C-peptide.
30

Il est également connu que la quasi-totalité des anticorps monoclonaux ou polyclonaux anti- C-peptide se lient plus ou moins de manière croisée avec la proinsuline et les formes intermédiaires produites avant le clivage en insuline et C-peptide. En effet, les anticorps polyclonaux ou monoclonaux,
35 produits à partir du C-peptide seul sont capables de reconnaître le C-peptide dans la proinsuline et dans les formes intermédiaires produites avant le clivage en insuline et C-peptide, du fait de la grande homologie entre C-peptide libre et C-peptide lié à l'insuline qui forme la proinsuline.

Chez le sujet normal, les concentrations de C-peptide sont environ 50 fois plus élevées que celles des proinsulines (environ 0.5-1.5 nM contre 5-25 pM à jeun). Cependant, dans certains cas de DNID (diabète non-insulinodépendant), chez les diabétiques de type I nouvellement découverts ainsi que dans leur fratrie, au cours de l'insulinôme et dans les hyperproinsulinémies familiales, les concentrations plasmatiques des proinsulines sont augmentées et peuvent dépasser 2000 pM. Dans ces situations, les principales formes présentes dans la circulation sanguine sont la proinsuline intacte et la des-31,32-proinsuline. Les autres intermédiaires ne sont présents dans la circulation sanguine qu'à des quantités infimes (Reaven et al, *J. Clin. Endocrinol. Metabol.* (1993), 1, pp. 44-48).

Il est donc important de mettre en oeuvre des procédés d'évaluation spécifiques du C-peptide, qui permettent d'éliminer les interférences dues à la proinsuline intacte et à la des-31,32-proinsuline afin de rendre un résultat fiable dans toute situation physiopathologique. Dinesens et al ("*First assay specific for intact human proinsuline*", communication réalisée à EASD'94 30th annual meeting - Düsseldorf 27 septembre - 1 octobre 1994) ont proposé un dosage spécifique de la proinsuline - sans interférence due à l'insuline - en utilisant deux anticorps spécifiques des jonctions AC (jonction entre la chaîne A de l'insuline et le C-peptide) et BC (jonction entre la chaîne B de l'insuline et le C-peptide) de la proinsuline. Toutefois, ces auteurs n'ont pas proposé un dosage spécifique du C-peptide permettant d'éliminer les interférences dues aux proinsulines.

L'utilisation d'anticorps spécifiques pour éliminer des interférences dues à la présence des substances biologiques apparentées (« anticorps de masquage ») est déjà décrit dans l'art antérieur. Par exemple, le brevet US 4 722 889 décrit un procédé de dosage spécifique de la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) de type sandwich utilisant deux anticorps capables de reconnaître également la thyrostimuline (TSH), la folliculostimuline (FSH) et la lutéostimuline (LH). Pour éliminer les interférences dues à ces trois dernières hormones, un troisième anticorps de masquage qui reconnaît spécifiquement l'épitope de l'unité β de la TSH, de la FSH et de la LH et qui a une affinité moindre pour l'unité β de la hCG est utilisé. De plus, quand l'antigène interférent est en excès, il y a saturation d'anticorps non spécifique de la phase solide et donc sous-évaluation de

l'anticorps à doser. Par contre, il n'a jamais été décrit dans l'art antérieur que pour obtenir un dosage spécifique, il est possible d'utiliser un anticorps qui reconnaît la substance à doser ainsi que le précurseur de cette substance considérée comme interférente. Dans ce cas, il est possible d'envisager tous
5 les types de dosage, parmi lesquels des dosages de type compétitif.

La Demanderesse a maintenant trouvé un procédé de dosage spécifique du C-peptide, qui permet d'éliminer toute interférence due à la des-31,32-proinsuline et/ou à la des-64,65-proinsuline. En effet, grâce à l'utilisation
10 d'anticorps spécifiques de la proinsuline intacte, de la des-31,32-proinsuline et/ou de la des-64,65-proinsuline, reconnaissant un épitope adjacent à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide, il est possible de procéder au dosage du C-peptide dans les milieux biologiques avec une grande spécificité et une grande précision.

15

L'invention concerne un procédé de dosage du C-peptide dans lequel un échantillon susceptible de contenir le C-peptide est mis en contact avec un ou plusieurs anticorps anti-C-peptide et

- soit un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline
20 intacte et de la des-31,32-proinsuline, reconnaissant un épitope soit adjacent, soit chevauchant, à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide gênant ainsi la fixation de l'anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-31,32-proinsuline,

- soit un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline
25 intacte et de la des-64,65-proinsuline, reconnaissant un épitope soit adjacent, soit chevauchant, à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide gênant ainsi la fixation de l'anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-64,65-proinsuline,

- soit un mélange dudit anticorps anti-proinsuline spécifique de la
30 proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline et dudit anticorps anti proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-64,65-proinsuline.

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, un échantillon susceptible de contenir le C-peptide est mis en contact :

35 • soit avec un anticorps anti-C-peptide et

- un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline, reconnaissant un épitope soit adjacent, soit

chevauchant, à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide gênant ainsi la fixation de l'anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-31,32-proinsuline,

5 - ou un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-64,65-proinsuline, reconnaissant un épitope soit adjacent, soit chevauchant, à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide gênant ainsi la fixation de l'anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-64,65-proinsuline,

• soit avec un mélange d'un premier anticorps anti-C-peptide,
10 d'un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline, reconnaissant un épitope soit adjacent, soit chevauchant, à l'épitope dudit premier anticorps anti-C-peptide gênant ainsi la fixation dudit premier anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-31,32-proinsuline,

15 d'un deuxième anticorps anti-C-peptide,
d'un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-64,65-proinsuline, reconnaissant un épitope adjacent, soit chevauchant à l'épitope dudit deuxième anticorps anti-C-peptide gênant ainsi la fixation dudit deuxième anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-64,65-proinsuline,
20

ledit premier et ledit deuxième anticorps anti-C-peptide étant éventuellement identiques.

Dans le cas où ledit premier et ledit deuxième anticorps anti-C-peptide sont identiques, un échantillon susceptible de contenir le C-peptide
25 est donc mis en contact avec un anticorps anti-C-peptide, un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline, et un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-64,65-proinsuline.

30 Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, ledit épitope reconnu par l'anticorps spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-

proinsuline, est situé dans la jonction AC de la proinsuline et de la des-31,32-proinsuline et inclut la séquence peptidique choisie parmi :

la séquence LysArg,

- 5 de préférence la séquence Leu Gln Lys Arg Gly Ile Val Glu
et de préférence encore la séquence Leu Gln Lys Arg Gly Ile Val Glu Gln.

10 De manière préférentielle, ledit anticorps anti-proinsuline selon l'invention inhibe d'au moins 50 % la liaison de l'anticorps anti-C-peptide à la proinsuline lorsqu'il est présent à la même concentration que l'anticorps anti-C-peptide.

15 Selon un autre mode préféré de l'invention, ledit épitope reconnu par l'anticorps spécifique de la proinsuline intacte et la des-64,65-proinsuline, est situé dans la jonction BC de la proinsuline et la des-64,65-proinsuline et inclut la séquence peptidique :

Arg Arg.

20 Les anticorps utilisés pour la mise en oeuvre du procédé, selon l'invention, peuvent être des anticorps monoclonaux ou des anticorps polyclonaux. On préfère mettre en oeuvre au moins un anticorps monoclonal.

25 Comme anticorps spécifiques de la des-31,32-proinsuline et de la proinsuline, on peut utiliser en particulier, des anticorps monoclonaux qui reconnaissent un épitope soit adjacent, soit chevauchant, à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide, gênant ainsi la fixation de l'anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-31,32-proinsuline, ledit épitope étant situé dans la jonction AC de la proinsuline et la des-31,32-proinsuline et la séquence incluant une séquence peptidique choisie parmi :

30 Lys Arg,

préférentiellement la séquence :

Leu Gln Lys Arg Gly Ile Val Glu

et plus spécialement la séquence :

Leu Gln Lys Arg Gly Ile Val Glu Gln.

35 Un tel anticorps peut être notamment l'anticorps monoclonal AC1D4, obtenu à partir d'un hybridome déposé auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes de l'Institut Pasteur, le 4 juin 1997, sous le numéro I-1873.

Pour mettre en oeuvre le procédé selon l'invention on peut utiliser des anticorps spécifiques de la des-64,65-proinsuline et de la proinsuline qui reconnaissent un épitope soit adjacent, soit chevauchant à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide, gênant ainsi la fixation de l'anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-64,65-proinsuline, ledit épitope étant situé dans la jonction BC de la proinsuline et la des-64,65-proinsuline et incluant la séquence peptidique choisie parmi :

la séquence Arg Arg,

la séquence Phe Tyr Thr Pro Lys Thr Arg Arg Glu Ala Glu Asp Leu Gln Val,

la séquence Thr Pro Lys Thr Arg Arg Glu Ala Glu Asp Leu Gln Val,

et la séquence Phe Tyr Thr Pro Lys Thr Arg Arg Glu Ala Glu Asp Leu.

On préfère les anticorps spécifiques de la des-64,65-proinsuline et de la proinsuline, qui reconnaissent un épitope correspondant aux séquences :

Thr Pro Lys Thr Arg Arg Glu Ala Glu Asp Leu Gln Val

ou

Phe Tyr Thr Pro Lys Thr Arg Arg Glu Ala Glu Asp Leu.

Il est évident que lorsqu'on utilise un anticorps spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline, il est possible d'éviter les interférences dues à la liaison de l'anticorps anti-C-peptide avec la split-32,33-proinsuline. De même, en utilisant un anticorps spécifique de la proinsuline intacte et de la des-64,65-proinsuline, il est possible d'éviter les interférences dues à la liaison de l'anticorps anti-C-peptide avec la split-65,66-proinsuline.

Le procédé selon l'invention est utile pour le dosage du C-peptide dans des échantillons biologiques tels que plasma, sérum ou urines.

Un procédé de dosage préféré selon l'invention est un dosage du type « sandwich ». Selon ce type de dosage, un anticorps anti-C-peptide, monoclonal ou polyclonal, peut être fixé sur une phase solide. On préfère que cet anticorps anti-C-peptide soit un anticorps monoclonal. Après la mise en contact avec l'échantillon biologique à doser, un deuxième anticorps anti-C-peptide lié à un marqueur, par exemple enzymatique, est ajouté. Les anticorps qui permettent, selon l'invention, le dosage spécifique du C-peptide (notamment l'anticorps spécifique de la des-31,32-proinsuline et éventuellement l'anticorps spécifique de la des-64,65-proinsuline) peuvent

être mis en oeuvre, soit simultanément avec le deuxième anticorps anti-C-peptide, soit avant ce dernier. Ce dosage peut être réalisé soit en un temps, soit en deux temps et l'évaluation du C-peptide peut être effectuée en utilisant toute méthode de détection, telle que la détection enzymatique, ou la détection
5 utilisant un agent radioactif, fluorescent, chimioluminescent, etc.

Un autre type de dosage, qui peut être mis en oeuvre selon le procédé de l'invention, est un dosage radioimmunologique de type « compétitif ». Selon ce type de dosage, on met en contact un anticorps anti-C-peptide, monoclonal
10 ou polyclonal, qui peut être fixé sur une phase solide, avec un échantillon biologique à doser. Puis, on introduit l'anticorps spécifique de la des-31,32-proinsuline, et/ou l'anticorps spécifique de la des-64,65-proinsuline, ainsi que du C-peptide marqué par un marqueur détectable tel qu'un agent cité ci-dessus.

15 Les troussees qui contiennent un anticorps anti-C-peptide et un anticorps spécifique de la des-31,32-proinsuline et de la proinsuline et/ou un anticorps spécifique de la des-64,65-proinsuline et de la proinsuline, font également partie de la présente invention. Ces troussees permettent de mettre en oeuvre
20 le procédé de dosage spécifique du C-peptide. Les troussees, selon l'invention, sont utilisées notamment pour la mise en oeuvre d'un dosage, soit de type sandwich, soit de type compétitif, spécifique du C-peptide.

25 PRODUCTION ET CARACTERISATION DE L'ANTICORPS MONOCLONAL AC1D4 :

1. Production

30 L'anticorps monoclonal AC1D4 a été obtenu par hybridation lymphocytaire.
Des souris Balb/c femelles de 6 semaines ont reçu au total 4 injections intrapéritonéales de proinsuline humaine. Au jour 1 les souris ont été immunisées avec 50 µg de proinsuline humaine par voie intrapéritonéale en
35 présence d'adjuvant complet de Freund (ACF). Trois semaines plus tard les souris ont été immunisées de nouveau avec 50 µg de proinsuline humaine en présence d'adjuvant incomplet de Freund. Une troisième immunisation a été réalisée 3 semaines plus tard, dans les mêmes conditions que précédemment

en utilisant une solution de la proinsuline humaine dans une solution saline de tampon phosphate à pH 7,4 (PBS). Des échantillons de sang de souris ont été prélevés après la deuxième et la troisième injections, 12 jours après chaque injection. Les sérums ont été testés en ELISA, RIA et en SPOT (*Franck R. Tetrahedron, (1992), 48, p 9217-9232*) pour la présence d'anticorps anti-proinsuline humaine.

Les souris ayant un fort taux sérique d'anticorps anti-proinsuline ont été choisies pour une fusion lymphocytaire. Les souris sélectionnées ont reçu une dernière injection de proinsuline un mois après la troisième injection. La dose de 20 µg a été injectée en deux fois. Trois jours plus tard les souris ont été décapitées et leur rate prélevée. Après broyage de la rate, les lymphocytes ont été fusionnés avec les cellules myélomateuses de la souris de la lignée P3-X63-Ag8.653 en présence de polyéthylèneglycol. La technique d'hybridation lymphocytaire qui a été utilisée est celle de ClonaCell™ proposée par StemCell technologies Inc (distribué en France par TEBU, Le Perray Yvelines). La sélection des hybridomes sécréteurs d'anticorps a été assurée par une série d'essais menés en parallèle en ELISA (utilisation de la proinsuline humaine immobilisée) et RIA (utilisation de la proinsuline humaine iodée). Les hybridomes sécréteurs ont été analysés en SPOT pour leur activité anti-jonctions AC ou BC.

Pour la mise en oeuvre de la méthode ELISA, des microplaques NUNC ont été revêtues avec de la proinsuline humaine, en utilisant une solution de proinsuline humaine (C= 0,1 µg/ml) dans du PBS, sous un volume de 100 µl. Les plaques ont été incubées pendant une nuit à +4°C. Après trois lavages avec une solution saline de tampon phosphate additionnée de Tween 20 à 0,1% (PBS-Tween), 200 µl de surnageant de culture ou 100 µl d'anticorps purifiés en concentrations décroissantes ont été déposés dans les microplaques et incubés pendant 3 heures à température ambiante. Ensuite, les microplaques ont été lavées trois fois avec du PBS-Tween et additionnées d'un deuxième anticorps. Cet anticorps, dirigé contre les IgG de souris (spécificité gamma), a été couplé à la peroxydase et a été mis en solution dans PBS-Tween (Dilution 1/3000). Les microplaques ont été incubées pendant une heure à 37°C, puis lavées trois fois avec du PBS-Tw. La révélation de la réaction a été effectuée en utilisant comme substrat l'orthophényldiamine en solution (C = 30 mg/ml) dans une solution de tampon citrate pH=5 contenant 0,03% de peroxyde d'hydrogène. Après 20 minutes

d'incubation à température ambiante et à l'abri de la lumière, l'absorbance a été lue à $\lambda=450$ nm. La réaction enzymatique peut être arrêtée par 50 μ l d'acide sulfurique 4N, la lecture se fait alors à $\lambda=490$ nm.

5 Pour la mise en oeuvre de la méthode RIA, 100 μ l de surnageant de culture ou 100 μ l d'anticorps purifiés en concentrations décroissantes ont été déposés dans les tubes revêtus avec des anticorps de mouton anti-IgG de souris. Après 3 heures d'incubation à température ambiante, les tubes ont été lavés trois fois avec 2 ml de PBS, puis y sont ajoutés 100 μ l de proinsuline
10 iodée à 3000 cpm en solution dans du PBS contenant 1% de BSA. Les tubes sont incubés pendant une nuit à température ambiante, puis lavés trois fois au PBS (2 ml/tube) et ensuite sont introduits dans un compteur gamma pour lecture.

15 Un des hybridomes ainsi retenus a été le AC1D4. Cet hybridome a été cloné par dilution limite (*Lefkovits I and Waldmann S. 1979, Cambridge University Press, Cambridge*). Selon cette technique, la suspension cellulaire est diluée de 10 en 10 jusqu'à l'obtention d'une solution à 5 cellules/ml. Cette solution est répartie dans les microplaques de culture cellulaire à raison de
20 100 μ l par puits. Ultérieurement, l'examen au microscope inversé permet de contrôler le développement cellulaire et de retenir les puits présentant un seul clone.

25 2. Caractérisation

2.1. Spécificité antigénique

L'anticorps AC1D4 d'isotype IgG1 reconnaît :

- la proinsuline humaine et la des-31,32-proinsuline dans le format ELISA
30 (proinsuline immobilisée)
- la proinsuline humaine et la des-31,32-proinsuline dans le format RIA
20 (proinsuline iodée en solution).

Les résultats de ces études sont donnés dans les figures 1 et 2.

35 La figure 1 représente la liaison de l'anticorps AC1D4 à la proinsuline en ELISA.

La figure 2 représente la liaison de l'anticorps AC1D4 à la proinsuline marquée en RIA.

2.2. Réactions croisées

Des essais de compétition par l'insuline et le C-peptide humain de la
liaison de l'anticorps AC1D4 à la proinsuline humaine iodée ont été réalisés
par RIA. Les conditions expérimentales ont été identiques à celles de la
méthode RIA indiquées précédemment (voir Production) à l'exception de
l'étape d'incubation de la proinsuline. Dans le cas présent, après l'étape de
l'incubation de l'anticorps AC1D4 dans les tubes (qui est suivie de lavages),
l'insuline ou le C-peptide, à 10 µg/ml, ont été incubés en même temps que la
proinsuline iodée.

Les résultats ont montré que l'insuline humaine et le C-peptide
n'inhibent pas la liaison de l'anticorps AC1D4 à la proinsuline iodée.

2.3. Détermination de la séquence de l'épitope

La séquence de l'épitope a été déterminée par la technique SPOTTM.
Sur une membrane de nitrocellulose, des peptides constitués de 9 acides
aminés, et chevauchants entre eux de 8 acides aminés, sont synthétisés. Les
peptides synthétisés recouvrent ainsi la totalité de la molécule de la
proinsuline humaine (soit au total 78 peptides). Cette membrane a servi de
support antigénique pour analyser la séquence reconnue par l'anticorps
monoclonal à tester.

Le protocole utilisé, pour la réaction immunologique après synthèse
peptidique, est le suivant :

La membrane a été saturée dans un tampon de saturation contenant 10% de
CRB (Cambridge Research Biochemicals commercialisé par GENOSYS ref. :
SU-07-250) 0,5% de Tween et 5% de saccharose dans du TBS (Tris Buffer
Saline). Après une nuit, sous agitation et à température ambiante, la
membrane a été lavée au TBS-Tween et l'anticorps AC1D4 dilué dans le
tampon de saturation (C=1µg/ml) a été ajouté. Ensuite, l'ensemble a été
incubé, sous agitation, pendant une heure et demie à 37°C. Après lavage au
TBS-Tween, l'addition d'un anticorps anti-IgG de souris couplé à la
phosphatase alcaline a permis - après incubation pendant une heure à
température ambiante et sous agitation - de révéler la présence de l'anticorps
à étudier. Le complexe formé a été visualisé par ajout du substrat BCIP (sel de

5-bromo, 4-chloro, 3-indolyl phosphate toluidinium) contenant du chlorure de magnésium et du bleu de Thiazolyle dans une solution saline de tampon citrate CBS (citrate buffer saline).

5 Le peptide reconnu par l'anticorps AC1D4 est le peptide ayant la séquence :

Leu Gln Lys Arg Gly Ile Val Glu Gln

10 Cette séquence est située dans la jonction de la chaîne A de l'insuline et du C-peptide.

2.4. Paramètres cinétiques

15 Les paramètres ont été déterminés par le système BIAcore™. Ce système mesure en temps réel la liaison d'un anticorps à son antigène. L'unité de mesure est le RU, et cette méthode permet la détermination de la constante de vitesse d'association (K_{on}), de la constante de vitesse de dissociation (K_{off}) et enfin le calcul de la constante (K_A) de la liaison de l'anticorps à la proinsuline humaine. Les résultats de cette étude sont donnés dans le

20 Tableau I.

TABLEAU I

Anticorps Monoclonal	AC1D4
Signal RU	1305
$K_{off} (s^{-1})$	$1,65 \cdot 10^{-5}$
$K_{on} (M^{-1}s^{-1})$	$1,16 \cdot 10^5$
$K_A (M^{-1})$	$7 \cdot 10^9$

25

2.5. Liaison d'un anticorps monoclonal anti-C-peptide à la proinsuline humaine en présence et en absence de l'anticorps AC1D4.

30 Un anticorps monoclonal anti-C-peptide, le PEP001 et l'anticorps AC1D4 ont été testés par le système BIAcore™ pour leur capacité à se fixer simultanément sur la proinsuline couplée au dextran. L'anticorps monoclonal

PEP001 est fourni par la société DAKO et reconnaît un épitope du C-peptide correspondant à la séquence suivante :

Pro Gly Ala Gly Ser Leu Gln Pro Leu Ala Leu Glu Gly Ser

5 Cet épitope est adjacent à l'épitope reconnu par l'anticorps AC1D4 sur la proinsuline humaine.

Pour cet essai, ont été utilisées des quantités croissantes de l'anticorps AC1D4. Les résultats de cette étude sont donnés à la figure 3.

- 10 - La courbe 1 représente la liaison de l'anticorps PEP001 sur la proinsuline en absence de l'anticorps AC1D4.
- La courbe 2 représente la liaison de l'anticorps PEP001 sur la proinsuline en présence de l'anticorps AC1D4 à la même concentration que l'anticorps PEP001. Dans ce cas on observe une inhibition de 50% de la liaison de l'anticorps PEP001 par l'anticorps AC1D4.
- 15 - La courbe 3 représente la liaison de l'anticorps PEP001 sur la proinsuline en présence de l'anticorps AC1D4 à une concentration 10 fois supérieure par rapport à la concentration de l'anticorps PEP001. Dans ce cas, on observe une inhibition de 70% de la liaison l'anticorps PEP001 par l'anticorps AC1D4.

20 Les exemples suivants illustrent l'invention et sont donnés à titre non limitatif.

25 **EXEMPLE 1 :**

Procédé de dosage spécifique du C-peptide dans le sérum :
Dosage immunoenzymatique de type « sandwich ». Evaluation des
conditions optimales.

30 Pour la réalisation de cet essai, on a utilisé un appareil automatique de type Access™. L'essai est réalisé avec 20 µl de sérum. Deux anticorps spécifiques de la proinsuline ont été utilisés :

- l'anticorps AC1D4 reconnaissant spécifiquement la proinsuline et la des-31,32-proinsuline et
- 35 • l'anticorps BC9B6 reconnaissant spécifiquement la proinsuline et la des-64,65-proinsuline.

Ce dernier anticorps reconnaît un épitope de la jonction BC correspondant à la séquence peptidique :

Thr Pro Lys Thr Arg Arg Glu Ala Glu Asp Leu Gln Val

5 Pour déterminer la concentration des anticorps AC1D4 et BC9B6 nécessaires pour éliminer les interférences dues à la proinsuline intacte, la des-31,32-proinsuline et la des-64,65-proinsuline, on a utilisé des concentrations croissantes de ces anticorps, seuls ou en mélange.

10 Comme phase solide, on a utilisé des billes de latex ferriques (Rhône Poulenc réf. MI-070/60) sur lesquelles est fixé par des liaisons covalentes l'anticorps monoclonal anti-C-peptide, PEP001.

Dans le tube de lecture sont introduits dans l'ordre :

- 15 1. 50 µl de billes revêtues d'anticorps monoclonal anti-C-peptide,
2. 20 µl de sérum ayant subi un traitement préalable au charbon actif et dans lequel on introduit des concentrations croissantes de proinsuline ou de des-31,32-proinsuline ou de des-64,65-proinsuline,
20 3. 80 µl de tampon pH=8 composé de Tris 0,02 M, NaCl 0,15 et des conservateurs,
et
4. 50 µl de conjugué anticorps polyclonal de chèvre anti-C-peptide phosphatase alcaline dans un tampon pH=8 (constitué de Tris 0,1M, de MgCl₂ 2mM, de ZnCl₂ 0,1M, de NaCl 0,15M et additionné d'une protéine et des conservateurs) et contenant l'anticorps monoclonal AC1D4 et
25 l'anticorps monoclonal BC9B6 à différentes concentrations : 0 µg/ml, 1 µg/ml, 5 µg/ml, 10µg/ml et 20 µg/ml.

30 Après 30 minutes d'incubation à 37°C, on lave trois fois avec un tampon pH=8 (composé de Tris 0,02 M, de NaCl 0,15 et des conservateurs) et on ajoute 200µl de substrat Lumi-Phos™ 530. On incube à nouveau pendant 5 minutes à 37°C et on mesure la luminescence générée par la réaction avec un luminomètre.

35

Les résultats de cette étude sont donnés dans les tableaux II à IV. Les résultats sont exprimés en pourcentage de réaction croisée.

TABLEAU II

AC1D4	0 µg/ml	20 µg/ml
Proinsuline	92	8
Des-31,32-proinsuline	108	16
Des-64,65-proinsuline	94	85

TABLEAU III

BC9B6	0µg/ml	20µg/ml
Proinsuline	92	8
Des-31,32-proinsuline	108	115
Des-64,65-proinsuline	94	8

TABLEAU IV

AC1D4+BC9B6 $Q^*_{AC1D4} = Q_{BC9B6}$	0µg/ml	2µg/ml	10µg/ml	20µg/ml	40µg/ml
Proinsuline	92	23	4	2	18
Des-31,32-proinsuline	108	65	30	19	13
Des-64,65-proinsuline	94	48	18	10	7

Q^*_{AC1D4} : Quantité de AC1D4

Les résultats du Tableau IV démontrent que lorsqu'on ajoute le mélange des anticorps AC1D4 et BC9B6 d'une concentration chacun de 20µg/ml, il est possible d'obtenir une réaction croisée avec la proinsuline inférieure à 5%, une réaction croisée avec la des-31,32-proinsuline inférieure à 15% et une réaction croisée avec la des-64,65-proinsuline inférieure à 10%.

EXEMPLE 2 :**Procédé de dosage spécifique du C-peptide dans les urines ;
Dosage immunoenzymatique type « sandwich »**

5 Pour doser le C-peptide dans les urines, il est possible de procéder comme indiqué dans l'exemple 1, en diluant préalablement l'échantillon de l'urine au 1/20ème.

10 En ajoutant l'anticorps AC1D4 à une concentration de 30 µg/ml, et l'anticorps BC9B6 à une concentration de 5 µg/ml, il est possible d'obtenir une interférence due à la proinsuline inférieure à 5%, une interférence due à la des-31,32-proinsuline inférieure à 10%, et une interférence due à la des-64,65-proinsuline inférieure à 20%.

15

EXEMPLE 3 :**Procédé de dosage spécifique du C-peptide dans le sérum ;
Dosage radioimmunologique par compétition.**

20 Le dosage repose sur la compétition entre une quantité fixe de tyr-C-peptide marqué à l'iode (I^{125}) et le C-peptide contenu dans les solutions étalons ou les échantillons à doser, vis à vis d'un nombre limité de sites anticorps anti-C-peptide.

25 Pour réaliser ce dosage, on utilise des tubes polystyrène revêtus avec un anticorps monoclonal anti-C-peptide PEP001 et on procède comme suit :

Dans chaque tube on introduit :

30 - 100 µl d'une solution standard, contenant de 0,2 à 30 ng/ml de C-peptide en solution dans une solution tampon phosphate pH=6,8 additionné de protéines et contenant 0,1 % d'azoture de sodium, ou 100 µl de l'échantillon à doser,

et

35 - 50 µl d'une solution contenant de Tyr-C-peptide monoiodé dilué dans un tampon phosphate contenant 0,1% d'azoture de sodium et l'anticorps AC1D4 dirigé spécifiquement contre la jonction AC de la molécule de la proinsuline à 20 µg/ml.

On recouvre les tubes de Parafilm™. Après incubation pendant 2 heures à température ambiante et sous agitation horizontale, on élimine le milieu réactionnel par aspiration et on lave avec 2 ml d'une solution tampon pH=7,4 contenant de l'imidazole 0,05 M, de l'azide de sodium 0,0025% et de conservateurs. On élimine cette solution par aspiration et on répète deux fois encore l'opération du lavage.

Ensuite, on détermine la radioactivité de chaque tube à l'aide d'un scintillateur gamma réglé sur la mesure de I^{125} . Le comptage est effectué pendant une minute.

L'évaluation de la quantité de C-peptide est effectuée par rapport à une gamme d'étalonnage. La limite de détection de cette méthode est de 0,15 ng/ml.

Pour évaluer la spécificité de ce dosage, deux sérums ont été surchargés avec de la proinsuline, de la des-31,32-proinsuline et de la des-64,65-proinsuline à différentes concentrations.

L'essai a été effectué en présence et en absence de l'anticorps AC1D4 (C=20 μ g/ml). Les résultats de cet essai sont indiqués dans les tableaux V à VII.

TABLEAU V

SERUMS SURCHARGES AVEC DE LA PROINSULINE

Sérums	Surcharge (pmol / ml)	Sans anticorps AC1D4		Avec anticorps AC1D4	
		Valeur trouvée (pmol / ml)	Augmentation après surcharge (%)	Valeur trouvée (pmol / ml)	Augmentation après surcharge (%)
E1	0	0,628	-	0,621	-
	0,16	0,721	15	0,587	0
	0,67	0,980	56	0,659	6
	3,33	2,437	288	0,811	31
E2	0	2,998	-	3,33	-
	0,16	3,040	1	3,17	0
	0,67	3,363	12	3,35	1
	3,33	4,622	54	3,14	0

5

TABLEAU VI

SERUMS SURCHARGES AVEC DE LA DES-31,32-PROINSULINE

Sérums	Surcharge (pmol / ml)	Sans anticorps AC1D4		Avec anticorps AC1D4	
		Valeur trouvée (pmol / ml)	Augmentation après surcharge (%)	Valeur trouvée (pmol / ml)	Augmentation après surcharge (%)
E1	0	0,593	-	0,577	-
	0,16	0,640	8	0,606	5
	0,67	0,819	38	0,646	12
	3,33	1,858	213	0,700	21
E2	0	2,490	-	2,41	-
	0,16	2,730	10	2,35	0
	0,67	2,700	8	2,52	5
	3,33	3,971	59	2,56	6

10

TABLEAU VII

SERUMS SURCHARGES AVEC DE LA DES-64,65-PROINSULINE

Sérums	Surcharge (pmol / ml)	Sans anticorps AC1D4		Avec anticorps AC1D4	
		Valeur trouvée (pmol / ml)	Augmentation après surcharge (%)	Valeur trouvée (pmol / ml)	Augmentation après surcharge (%)
E1	0	0,494	-	0,552	-
	0,16	0,523	6	0,608	10
	0,67	0,734	49	0,900	63
	3,33	1,815	267	1,887	242
E2	0	2,401	-	2,25	-
	0,16	2,410	0	2,24	0
	0,67	2,614	9	2,66	18
	3,33	3,715	55	3,80	69

5

Les résultats de cette étude démontrent que la présence d'un anticorps monoclonal spécifique de la jonction AC de la proinsuline permet l'élimination de l'interférence due à la proinsuline, et à la des-31,32-proinsuline dans le dosage du C-peptide utilisant l'anticorps PEP001 dont l'épitope est proche de celui de l'AC1D4.

10

REVENDEICATIONS

1. Procédé de dosage du C-peptide dans lequel un échantillon susceptible de contenir le C-peptide est mis en contact avec un ou plusieurs anticorps anti-C-peptide et

5 - soit un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline, reconnaissant un épitope soit adjacent, soit chevauchant, à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide gênant ainsi la fixation de l'anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-31,32-proinsuline,

10 - soit un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-64,65-proinsuline, reconnaissant un épitope soit adjacent, soit chevauchant, à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide gênant ainsi la fixation de l'anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-64,65-proinsuline,

15 - soit un mélange dudit anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline et dudit anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-64,65-proinsuline.

20 2. Procédé de dosage du C-peptide, selon la revendication 1, dans lequel ledit anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline, reconnaît un épitope situé dans la jonction AC de la proinsuline et la des-31,32-proinsuline, ledit épitope incluant la séquence peptidique :

25 Lys Arg.

3. Procédé de dosage du C-peptide, selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline, reconnaît un épitope situé dans la jonction AC de la proinsuline et la des-31,32-proinsuline, ledit épitope incluant la séquence peptidique :

Leu Gln Lys Arg Gly Ile Val Glu.

4. Procédé de dosage du C-peptide, selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ledit anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline, reconnaît un épitope situé dans la jonction AC de la proinsuline et la des-31,32-proinsuline, ledit épitope incluant la séquence peptidique :

Leu Gln Lys Arg Gly Ile Val Glu Gln.

5. Procédé de dosage du C-peptide, selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ledit anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-64,65-proinsuline, reconnaît un épitope situé dans la jonction BC de la proinsuline et la des-64,65-proinsuline, ledit épitope incluant la séquence peptidique :

Arg Arg.

6. Procédé de dosage du C-peptide, selon l'une des revendications précédentes, dans lequel un échantillon susceptible de contenir le C-peptide est mis en contact avec un anticorps anti-C-peptide et un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-31,32-proinsuline reconnaissant un épitope soit adjacent, soit chevauchant, à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide gênant ainsi la fixation de l'anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-31,32-proinsuline.

7. Procédé de dosage du C-peptide, selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel un échantillon susceptible de contenir le C-peptide est mis en contact avec un anticorps anti-C-peptide et un anticorps anti-proinsuline spécifique de la proinsuline intacte et de la des-64,65-proinsuline reconnaissant un épitope soit adjacent, soit chevauchant, à l'épitope de l'anticorps anti-C-peptide gênant ainsi la fixation de l'anticorps anti-C-peptide sur la proinsuline intacte et la des-64,65-proinsuline.

8. Procédé de dosage du C-peptide, selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel au moins un desdits anticorps est un anticorps monoclonal.

5 9. Procédé de dosage du C-peptide, selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'échantillon est obtenu à partir de sérum, de plasma ou d'urines.

10 10. Procédé de dosage du C-peptide, selon l'une quelconque des revendications précédentes, de type « sandwich ».

11. Procédé de dosage du C-peptide, selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, de type dosage radioimmunologique par compétition.

15 12. Anticorps spécifique de la des-31,32-proinsuline et de la proinsuline qui reconnaît la séquence peptidique :

Leu Gln Lys Arg Gly Ile Val Glu Gln.

20 13. Hybridome déposé auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes de l'Institut Pasteur, le 4 juin 1997, sous le numéro I-1873.

14. Anticorps monoclonal spécifique de la des-31,32-proinsuline et de la proinsuline obtenu à partir de l'hybridome selon la revendication 13.

25

15. Utilisation d'anticorps monoclonaux qui reconnaissent un épitope situé dans la jonction AC de la proinsuline et la des-31,32-proinsuline incluant la séquence peptidique :

Lys Arg

30 pour la mise en oeuvre du procédé de dosage selon l'une des revendications 1 à 6 et 8 à 11.

16. Utilisation selon la revendication 15, d'anticorps monoclonaux, qui reconnaissent un épitope incluant la séquence choisie parmi:

la séquence Leu Gln Lys Arg Gly Ile Val Glu

5 et la séquence Leu Gln Lys Arg Gly Ile Val Glu Gln.

17. Utilisation d'anticorps monoclonaux qui reconnaissent un épitope situé dans la jonction BC de la proinsuline et la des-64,65-proinsuline incluant la séquence peptidique :

10

Arg Arg

pour la mise en oeuvre du procédé de dosage selon l'une des revendications 1 à 5 et 7 à 11.

18. Utilisation selon la revendication 17, d'anticorps monoclonaux, qui reconnaissent un épitope correspondant à une séquence peptidique choisie parmi :

15

la séquence Phe Tyr Thr Pro Lys Thr Arg Arg Glu Ala Glu Asp Leu Gln Val,

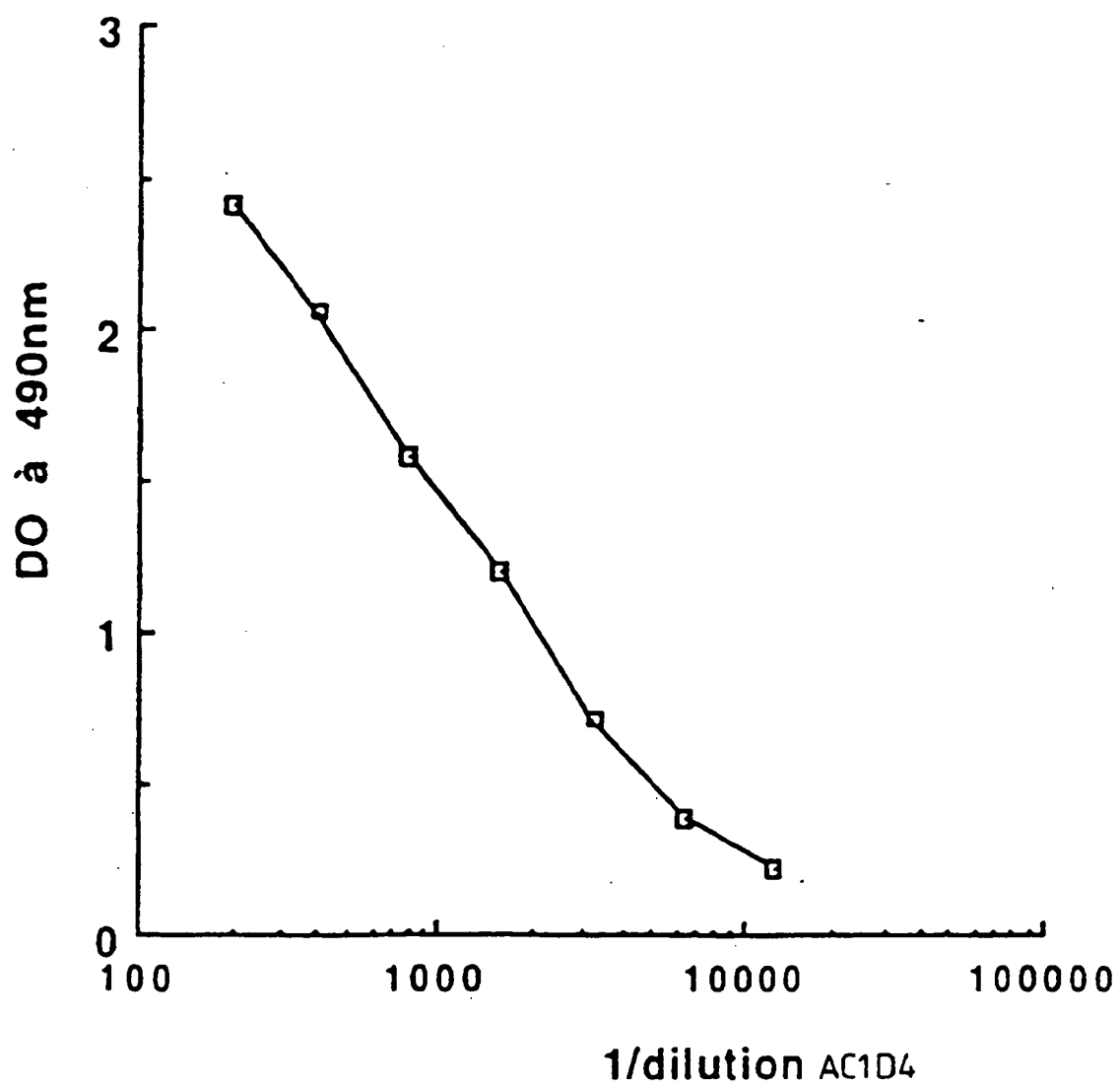
la séquence Thr Pro Lys Thr Arg Arg Glu Ala Glu Asp Leu Gln Val,

et la séquence Phe Tyr Thr Pro Lys Thr Arg Arg Glu Ala Glu Asp Leu.

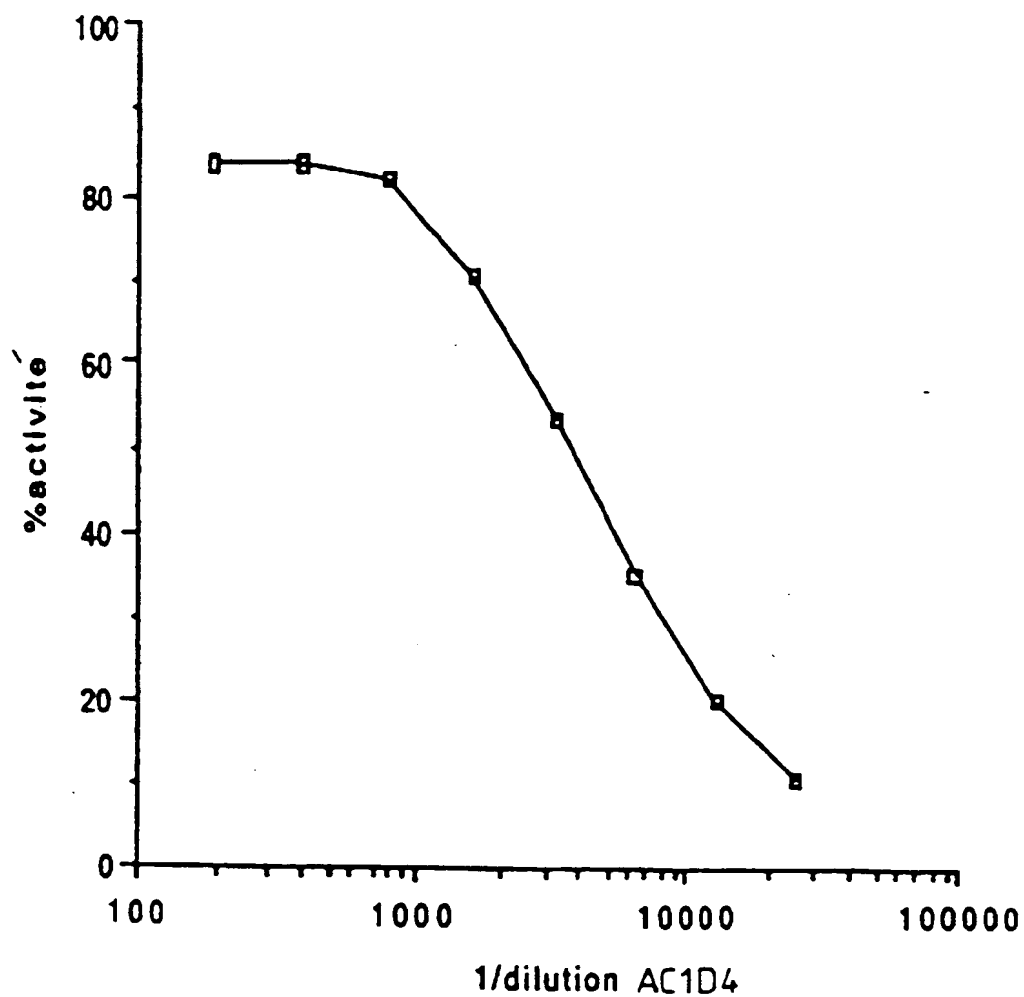
20

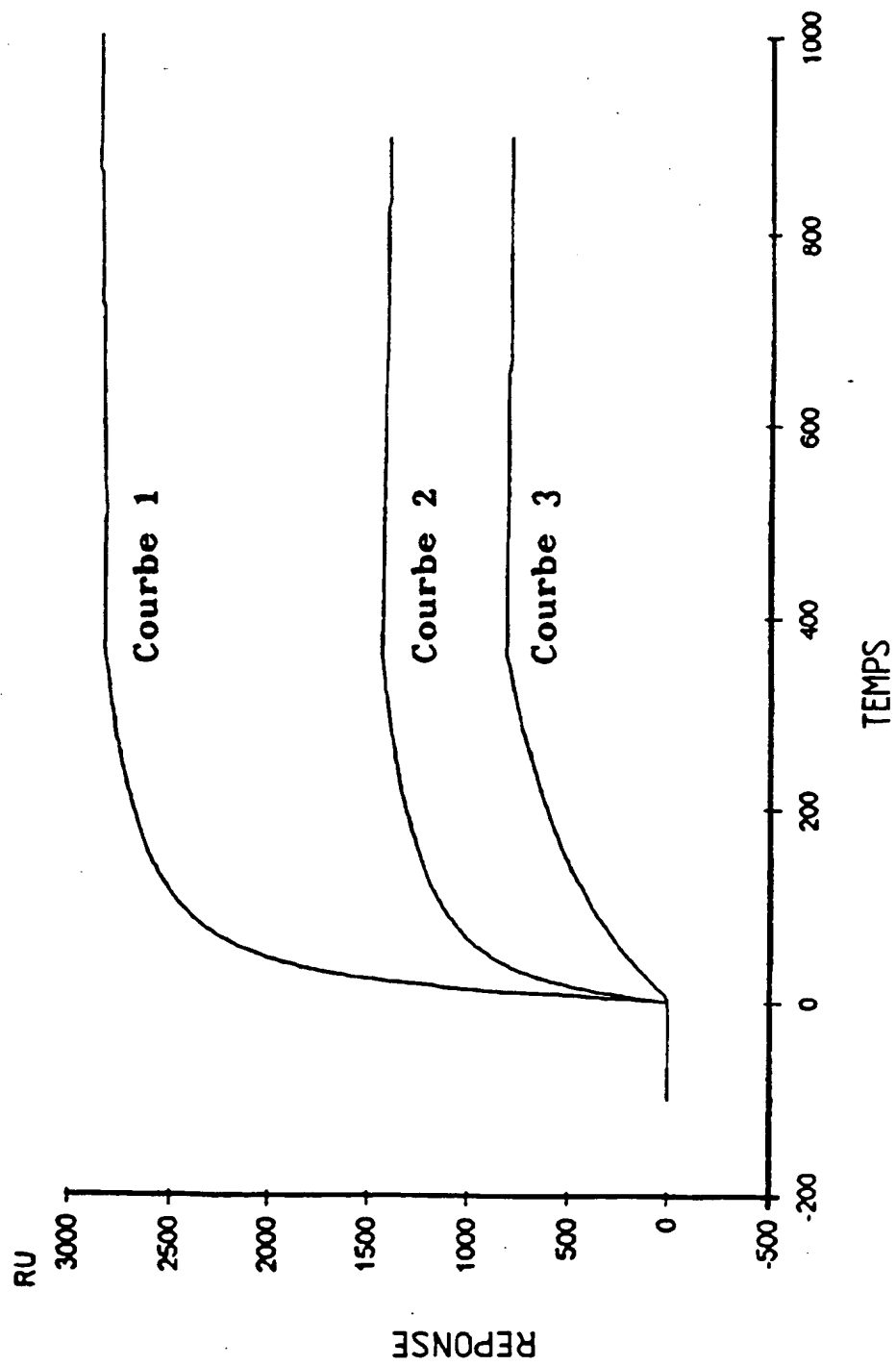
19. Trousse contenant un anticorps anti-C-peptide et un anticorps spécifique de la des-31,32-proinsuline et de la proinsuline et/ou un anticorps spécifique de la des-64,65-proinsuline et de la proinsuline.

1/3

FIG.1

2/3

FIG. 2

FIG. 3

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE**
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

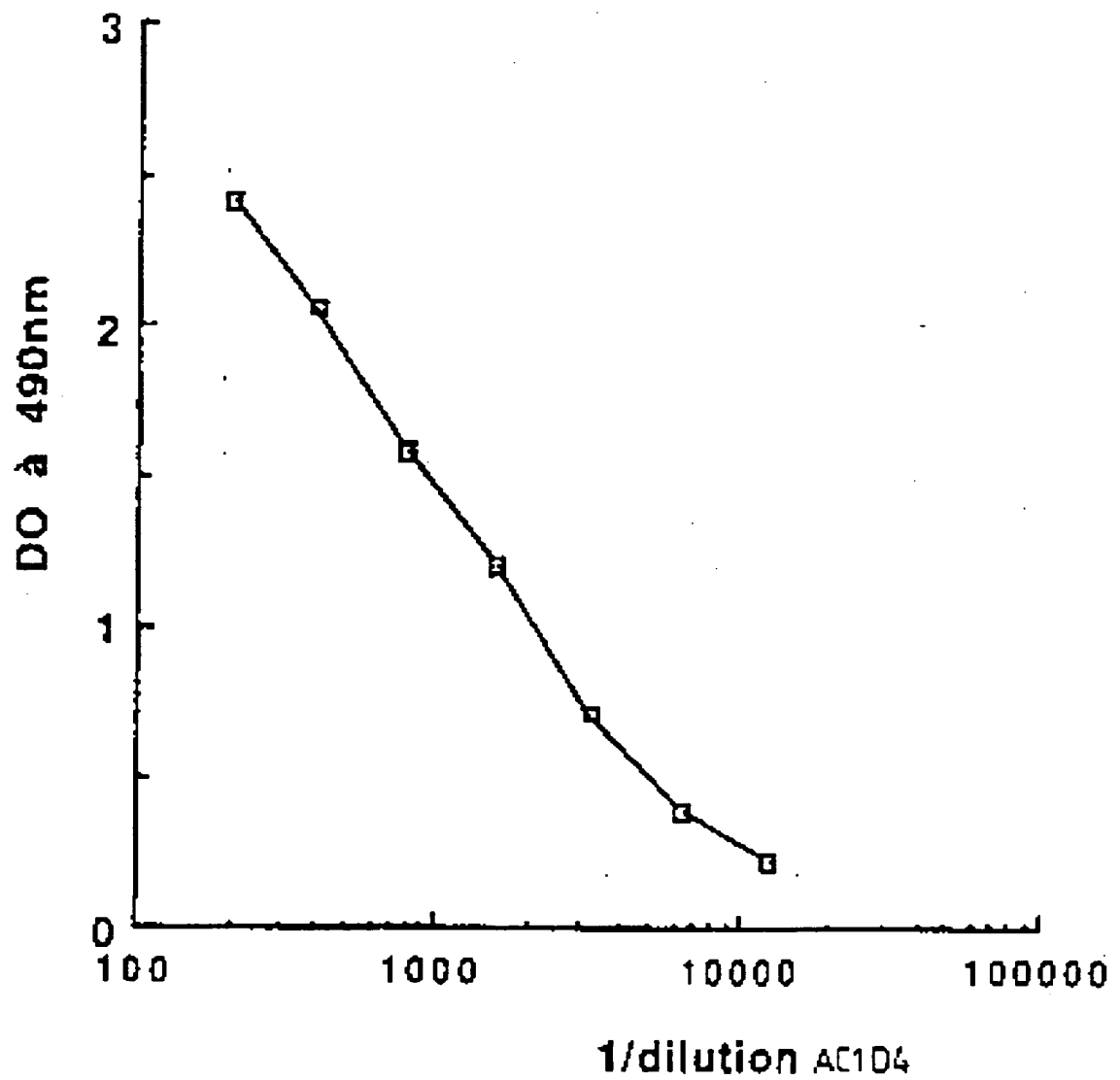
FA 544475
FR 9707730

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	MADSEN ET AL.: "The production and characterization of monoclonal antibodies specific for human proinsulin using a sensitive microdot assay procedure" ENDOCRINOLOGY, vol. 113, no. 6, 1983, pages 2135-2144, XP002058659 * abrégé *	1-5
D,A	US 4 722 889 A (LEE JIN P ET AL) 2 février 1988 * colonne 2, ligne 55 - ligne 59 *	1
D,A	EP 0 484 961 A (TOSOH CORP) 13 mai 1992 * abrégé *	1,8-10
D,A	ANGELO ET AL.: "A highly sensitive monoclonal antibody against human C-peptide" DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, vol. suppl. 1, 1985, AMSTERDAM, pages S18-S19, XP002058660 * abrégé 46. *	1,8,9,11
D,A	REAVEN ET AL.: "Plasma insulin, C-peptide, and proinsulin concentrations in obese and nonobese individuals with varying degrees of glucose tolerance" JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol. 76, no. 1, 1993, pages 44-48, XP002058661 * page 45, colonne de gauche *	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		G01N
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
16 mars 1998		Ceder, 0
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intermédiaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

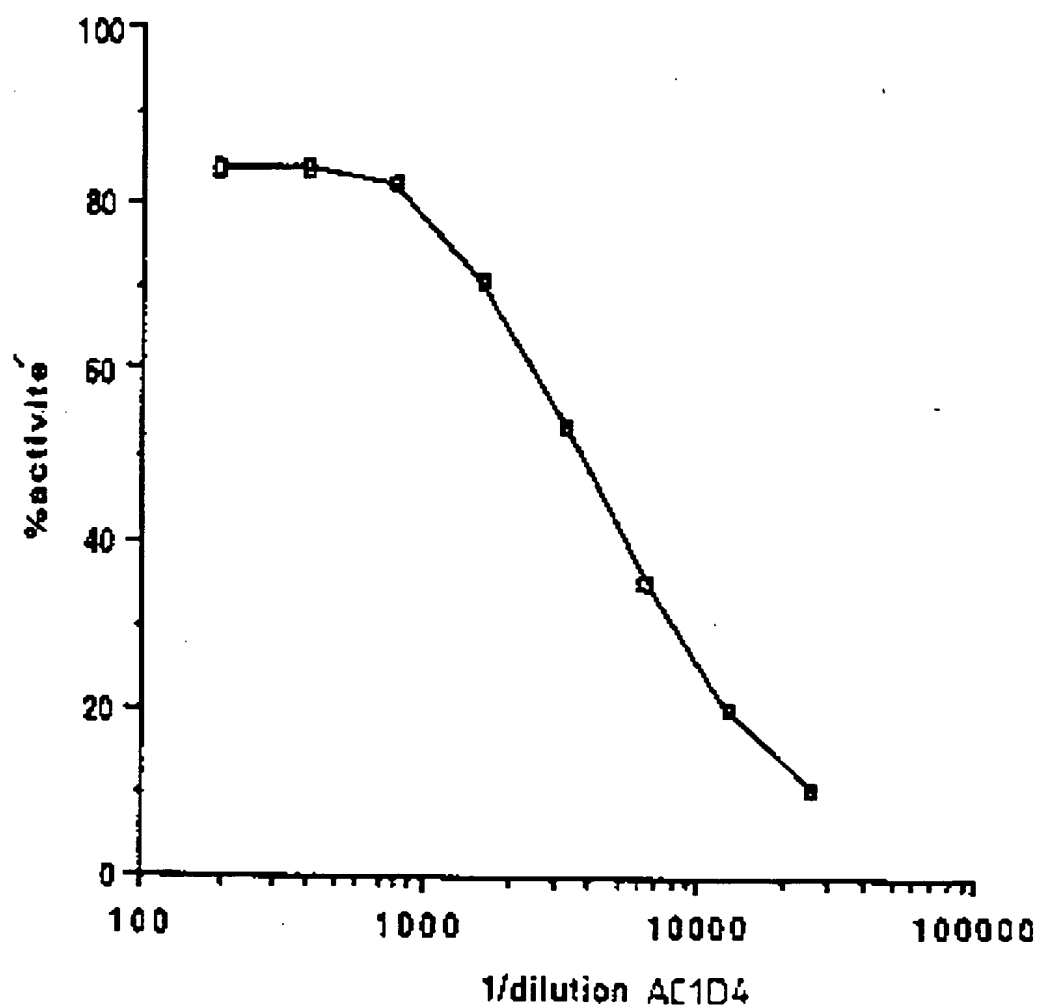
2

EPO FORM 1503 03 82 (P04C13)

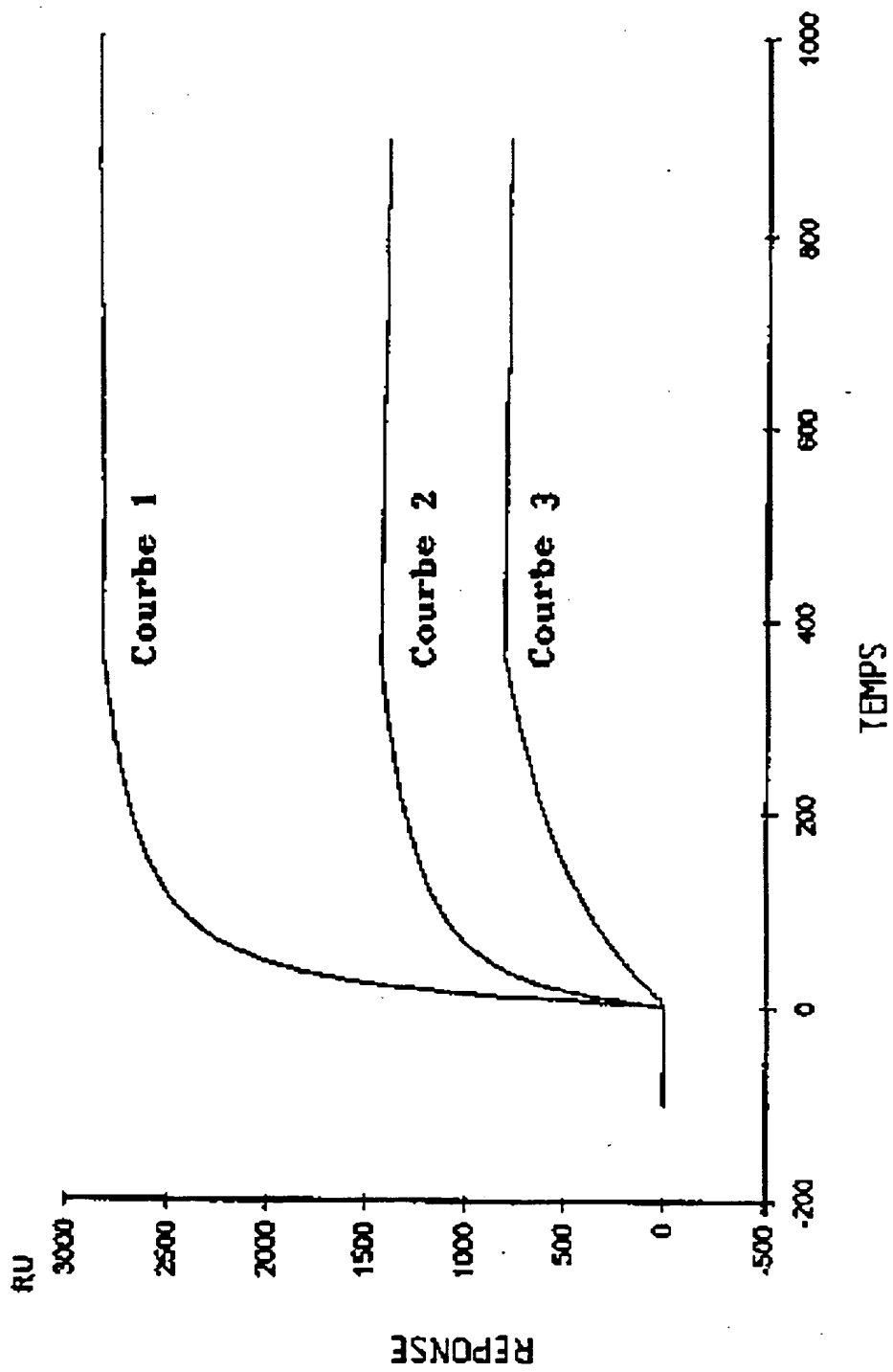
1/3

FIG.1

2/3

FIG. 2

3/3

FIG. 3